

ULTRASON RE-3000は超音波療法の既成概念を覆します。


Point 1 1つの機器で2つの機能

1つの機器でありながら超音波治療器と超音波骨折治療器、2つの目的で使用可能です。

Point 2 2ch同時に照射可能

2ch同時照射は照射面積の広がりにより治療の最速化を図れます。


■ Dualモード

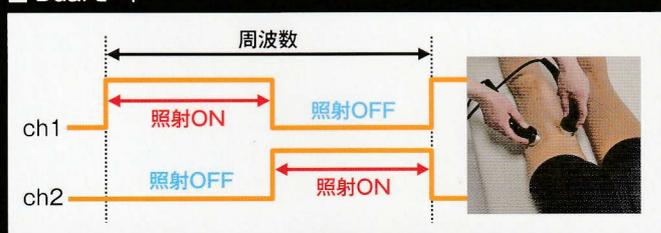

Point 3 周波数自動切替Switchモード

Switchモードは、施術中に1つのアプリケーションから2種類の周波数を自動で切り替えて照射することで、浅部、深部への治療が可能なモードです。1MHz時は緑、3MHz時は青に点灯するのでSwitchモード中でも一目で治療中の周波数がわかります。


■ Switchモード切替イメージ

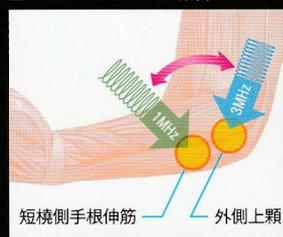

Point 4 Fixモード

Fixモードは、Dutyや強度を変調させることによって、擬似的に回転法やストローク法を表現したモードです。

■ Fixモード

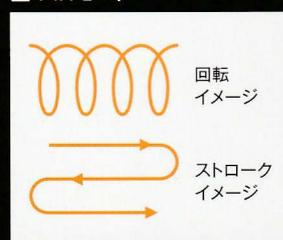

■ 固定タイプ アプリケーター



Point 5 わかりやすいガイダンス画面

症例や治療部位、目的に応じた臨床的ガイダンスを用意しました。症例別に登録されている設定値を参考に、超音波周波数、強度や治療時間などの設定を実際の治療画面に反映できます。

